



Atenschutzmaske

Schutzklasse FFP2 NR

Particle Filtering Half Mask
protection class FFP2 NR

EN149:2001 + A1:2009
Regulation (EU) 2016/425

  **CE 0598**


Art. Nr. DHX9001



Taizhou Donghaixiang Protective Equipment Co. Ltd.
No.3091 Du Nan Avenue Duqiao Town Linhai City Zhejiang
Province China
Tel: +86 (576) 8552 9553

Notifizierte Stelle *Notified body:*
SGS FIMKO OY, Notified Body 0598
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
t +358 9 696 361, f +358 9 692 5474, www.sgs.com

Importeur *Importer:*
KSi International GmbH
Zellescher Weg 3,
01069 Dresden, Germany

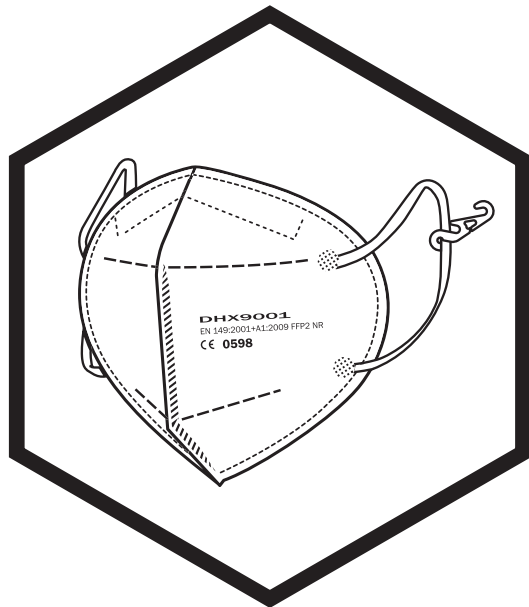



ANWEISUNGEN

ZUM ANLEGEN

1. Halten Sie die Halbmaske über die Nase und den Mund.
2. Ziehen Sie die Kopfbänder hinter die Ohren, und bringen Sie die Bänder am Clip an. Passen Sie den Sitz an, und überprüfen Sie die Dichtheit.
3. Passen Sie den Nasenclip so an, dass er sicher um die Nase liegt, und schmiegen Sie die Enden gegen die Wangen, um eine gute Dichtheit zu erzeugen.
4. Halten Sie zur Prüfung der Dichtheit beide Hände über die Maske, und atmen Sie kräftig aus. Sofern Luft aus dem Nasenraum austritt, drücken Sie den Nasenclip fester an, bei Luftaustritt an den Seiten passen Sie die Kopfbänder an.
5. Wiederholen Sie die Anpassungen, bis die Maske dicht ist.
6. Sollte die Maske nicht dicht sein, betreten Sie nicht den verunreinigten Bereich, da ansonsten Ansteckungsgefahr besteht.

BENUTZERHINWEISE:

Eine Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen und Warnhinweise zu dieser Maske kann zu einer Verminderung ihrer Wirksamkeit und ggf. zu Krankheiten oder Behinderungen führen. Eine Ausfertigung der Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Webseite unter folgendem Downloadlink: www.ksi-werbeartikel.de/DHX9001. Wie bei jedem Atemschutzgerät muss der Träger vor der Nutzung entsprechend geschult werden. Benutzer sollten vor dem Anlegen stets prüfen, ob die Maske in einem guten Gebrauchszustand sowie frei von Verunreinigungen, Schäden an den Kopfbändern usw. ist.

EINSATZGEBIET:

FFP2 Masken bieten Schutz vor festen und flüssigen gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen. Atemschutzmasken der Schutzklasse FFP2 eignen sich für Arbeitsumgebungen, in denen sich gesundheitsschädliche und erbgutverändernde Stoffe in der Atemluft befinden. Sie müssen mindestens 94% der in der Luft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,6 µm auffangen und dürfen eingesetzt werden, wenn der Arbeitsplatzgrenzwert höchstens die 10-fache Konzentration erreicht.

EINSCHRÄNKUNG:

Unter folgenden Umständen dürfen Sie die Atemschutzmaske nicht benutzen bzw. einen verunreinigten Bereich nicht betreten bzw. darin bleiben:

1. Die Umgebungsluft enthält weniger als 19,5 % Sauerstoff.
2. Sie riechen oder schmecken den Schadstoff.
3. Zum Schutz gegen Gase oder Dämpfe.
4. Die Schadstoffe oder deren Konzentrationen sind unbekannt bzw. unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährlich.
5. Beim Sandstrahlen, Farbsprühen und bei Asbestbehandlungen.
6. Unter explosiver Atmosphäre.

WARNHINWEISE:

1. Diese mit dem Zeichen „NR“ versehene Maske ist zur einmaligen Verwendung bestimmt.
2. Die vom Hersteller vorgegebene Konfiguration darf nie ersetzt bzw. modifiziert werden, und es dürfen keine Komponenten hinzugefügt oder weggelassen werden.
3. Diese Maske hilft beim Schutz vor bestimmten Partikelverunreinigungen, verhindert jedoch nicht vollständig das Risiko an Ansteckung oder Infektion.
4. Sofern Gesichtshaar unter die Gesichtsversiegelung gerät, werden die Dichtheitsanforderungen ggf. nicht erfüllt.
5. Wechseln Sie umgehend die Maske, wenn Ihnen das Atmen schwerfällt oder die Maske beschädigt bzw. deformiert wird.
6. Wechseln Sie die Maske, wenn die Dichtheit über dem Gesicht nicht erreicht werden kann.

LAGERUNG:

1. Lagern Sie die Maske bei Nichtverwendung in einem dichten Behälter außerhalb der verunreinigten Bereiche.
2. Bewahren Sie die Maske während des Transports in der Originalverpackung auf.

Schutzstufe: FFP2 NR mit Schutzgrad $\geq 94\%$

Halbbarkeit: zur einmaligen kurzzeitigen Verwendung vorgesehen; bei Lagerung im geschlossenen Beutel: 2 Jahre.

Art. Nr.: DHX9001 | Lagerung: Trocken, <80 % Luftfeuchtigkeit, -20°C bis +25°C

FITTING INSTRUCTIONS

1. Hold the particle half mask in position over the nose and mouth.
2. Pull the headharness behind to ears, attach the headharness to the retaining clip, improve comfort and prevent leakage.
3. Ensure the nose clip is securely moulded around the nose, resting the ends against the cheek to obtain a good seal.
4. To check for proper fit, cup both hands over the mask and exhale vigorously. If air leaks around the nose, tighten the nose clip, if air leaks around the edge, reposition the headharness for better fit.
5. Repeat adjustments until the mask is sealed properly.
6. If a proper seal cannot be achieved do not enter the contaminated area or it may cause illness.

USER INSTRUCTIONS:

Failure to follow the instructions and warning on the use of this mask during all times of exposure can reduce the effectiveness of the mask and could result in illness or disability. A copy of the Declaration of Conformity can be found on our website at the following download link: www.ksi-werbeartikel.de/DHX9001. As with any respiratory device, the wearer must be adequately trained prior to use. Before use, the wearer should always check the mask is in good condition - no dirt, no damage to headharness attachment etc.

FIELD OF APPLICATION:

FFP2 masks provide protection against solid and liquid harmful dusts, fumes and aerosols. FFP2 protection class respirators are suitable for work environments where harmful and mutagenic substances are present in the air breathed. They must capture at least 94% of airborne particles up to a size of 0.6 µm and may be used when the occupational exposure limit is no more than 10 times the concentration.

LIMITATION:

Do not use the respirator or enter or stay in a contaminated area under the following circumstances:

1. Atmosphere contains less than 19.5 % oxygen.
2. If you smell or taste contaminant.
3. For protection against gases or vapors.
4. Contaminants or their concentrations are unknown or immediately dangerous to life or health.
5. For sandblasting, paint-spray operations and asbestos treatment.
6. In explosive atmospheres.

WARNINGS:

1. This mask marked "NR" is for single use only.
2. Never substitute, modify, add, or omit parts in the configuration as specified by the manufacture.
3. This mask helps protect against certain particulate contaminants but does not completely eliminate exposure to the risk of contracting disease or infection.
4. It is unlikely that the requirements for leakage will be achieved if facial hair passes under the face seal.
5. Change the mask immediately if breathing becomes difficult or the mask becomes damaged or distorted.
6. Change the mask if a proper face seal cannot be achieved

STORAGE:

1. Store the mask in a sealed container away from contaminated areas when not use.
2. Store the mask in the original packing during transport.

Protection level: FFP2 NR with degree of protection $\geq 94\%$

Shelf life: intended for single short-term use; when stored in closed bag: 2 years.

Art. No.: DHX9001 | Storage: dry, <80% humidity, -20°C to +25°C